




## BR-102 plus

El sistema de monitorización ambulatoria de la presión arterial de SCHILLER combina una precisión y una comodidad sobresalientes

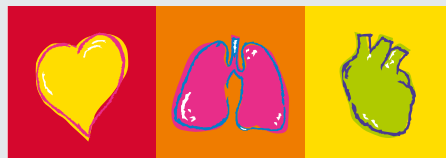

**SCHILLER**  
The Art of Diagnostics

# BR-102 plus

## Indispensable para la monitorización ambulatoria de la presión arterial

La versión más reciente de nuestro producto BR-102 plus se deriva de nuestros más de 30 años de experiencia y nuestra estrecha colaboración con expertos renombrados. Los médicos de todo el mundo consideran la monitorización ambulatoria de la presión arterial (ABPM, Ambulatory Blood Pressure Monitoring) como el método de referencia para las mediciones de la presión arterial. Este método ofrece información diagnóstica valiosa que los equipos hospitalarios o domésticos estacionarios no pueden ofrecer, como la variabilidad de la PA y la PA nocturna, así como también el descenso de la PA nocturna y la elevación de la PA matutina.

El sistema de monitorización ambulatoria de la presión arterial de SCHILLER combina dos técnicas de medición (la auscultatoria y la oscilométrica) en una: ambas se utilizan en paralelo. Esta combinación fiable garantiza que se obtengan lecturas correctas todas las veces.

Además, como el brazalete solamente se infla en la medida necesaria, ya casi no se puede oír ni sentir el BR-102. Al resultar este sistema más cómodo, se obtienen resultados de gran precisión que se pueden procesar y analizar adecuadamente con el software de evaluación DARWIN2 ABPM.



### Precisión en la que puede confiar

El BR-102 plus está validado clínicamente y cumple todas las normas reconocidas internacionalmente:

- Sociedad Británica de Hipertensión (BHS)<sup>1</sup>
- Protocolo Internacional de la Sociedad Europea de la Hipertensión (ESH)<sup>1</sup>
- Asociación para el Avance de la Instrumentación Médica (AAMI) SP10
- Recomendado por dabl® Educational Trust

<sup>1</sup> Prueba en proceso

### Comodidad óptima del paciente con la que se obtienen unos resultados precisos

- La tecnología tolerante al movimiento evita los reinflados y las lecturas erróneas
- El inflado dinámico a 30 mmHg sobre la lectura sistólica anterior reduce el tiempo de medición
- Bomba integrada y por tanto casi silenciosa
- La disponibilidad de cinco tamaños de brazalete, desde el tamaño pediátrico hasta el tamaño XL para adultos, garantiza que la precisión de las mediciones sea la mayor posible y que el paciente esté cómodo.





# DARWIN2 ABPM

## Análisis, interpretación y generación de informes

DARWIN2 ABPM es un programa fácil de usar para el sistema Windows® que ofrece máxima flexibilidad en la configuración, el análisis, la interpretación y la generación de informes de ABPM. Se pueden generar informes completos y profesionales en muy poco tiempo.

### Resumen interpretativo

Análisis automático de los niveles de ABPM en cuanto a normalidad y descenso nocturno conforme a las normas AHA<sup>1</sup>, ESH<sup>2</sup> o JNC 7<sup>3</sup>.

### Análisis de bata blanca

Los datos de la primera hora se comparan con los resultados completos de 24 horas. El software indica si el paciente presenta hipertensión de bata blanca.

### Informe en una sola página

El informe de una sola página incluye un gráfico de ABPM, un resumen interpretativo, análisis de caída durante el sueño y estadísticas con información del paciente seleccionado.

### Presentación clara de los resultados estadísticos

Se presentan estadísticas de los periodos de vigilia y sueño así como también de todos los demás periodos; estas estadísticas incluyen la presión arterial promedio, la frecuencia cardíaca, la presión del pulso, la presión arterial media y la carga de PA.

- 1 Recommendations for blood pressure measurement in humans. American Heart Association, 2005.
- 2 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension, 2013.
- 3 Seventh report of the joint national committee on prevention, detection, evaluation, and treatment of high blood pressure, 2003.

### Un producto ultramoderno y versátil

- Diseño ligero y compacto
- Sencillo de configurar y utilizar
- Uso previsto: hipertensión de bata blanca, hipertensión resistente a los fármacos, hipertensión enmascarada, síntomas de hipotensión con medicamentos antihipertensivos



Elabore informes claros de forma fácil y rápida con el sistema modular de generación de informes DARWIN2. El nivel de detalle y el aspecto de los informes se pueden adaptar al gusto.



**Asia**  
**SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia**  
52200 Kuala Lumpur, Malaysia  
Phone +603 6272 3033  
Fax +603 6272 2030  
sales@schiller.com.my  
www.schiller-asia.com



**Austria**  
**SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.**  
A-4040 Linz  
Phone +43 732 709 90  
Fax +43 732 757 000  
sales@schiller.at  
www.schiller.at



**China**  
**Alfred Schiller Medical Equipment Co. Ltd.**  
100015 Beijing, China  
Phone +86-10-84565453  
info@schillermedical.com  
www.schillermedical.cn



**France**  
**SCHILLER Médical S.A.S.**  
F-67162 Wissembourg/Cedex  
Phone +33 3 88 63 36 00  
Fax +33 3 88 94 12 82  
info@schiller.fr  
www.schiller-medical.com



**France (distribution France)**  
**SCHILLER France S.A.S.**  
F-77600 Bussy St Georges  
Phone +33 1 64 66 50 00  
Fax +33 1 64 66 50 10  
infoschiller@schiller-france.fr  
www.schiller-france.com



**Germany**  
**SCHILLER Medizintechnik GmbH**  
D-85622 Feldkirchen b. München  
Phone +49 89 62 99 81-0  
Fax +49 89 62 99 81-54  
info@schillermed.de  
www.schillermed.de



**Hungary**  
**SCHILLER Diamed Ltd.**  
H-1141 Budapest  
Phone +36 (1) 383-4780 / 460-9491  
Fax +36 (1) 383-4778  
sales@schiller.at  
www.schiller-hungary.hu



**India**  
**SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.**  
Mumbai - 400 001, India  
Phone +91 22 6152 3333/ 2920 9141  
Fax +91 22 2920 9142  
sales@schillerindia.com  
www.schillerindia.com



**Croatia**  
**Schiller medicinski instrumenti d.o.o.**  
10000 Zagreb  
Phone +385 1 309 66 59  
Fax +385 1 309 66 60  
info@schillerzg.hr  
www.schiller.ch



**Latin America**  
**SCHILLER Latin America, Inc.**  
Doral, Florida 33172  
Phone +1 954 673 0358  
Fax +1 786 845 06 02  
info@schillerla.ch  
www.schillerla.ch



**Poland**  
**SCHILLER Poland Sp. z o.o.**  
PL-02-729 Warszawa  
Phone +48 22 8432089  
Fax +48 22 8432089  
schiller@schiller.pl  
www.schiller.pl



**Russia & C.I.S.**  
**SCHILLER AG Rep. office**  
125124 Moscow, Russia  
Phone +7 (495) 970 11 33  
Fax +7 (495) 970 11 33  
mail@schiller-ag.com  
www.schiller-cis.com



**Serbia**  
**SCHILLER d.o.o.**  
11010 Beograd  
Phone +381 11 39 79 508  
Fax +381 11 39 79 518  
info@schiller.rs  
www.schiller.rs



**Slovenia**  
**SCHILLER d.o.o.**  
2310 Slovenska Bistrica  
Phone +386 2 843 00 56  
Fax +386 2 843 00 57  
info@schiller.si  
www.schiller.si



**Spain**  
**SCHILLER ESPAÑA, S.A.**  
E-28230-Las Rozas/Madrid  
Phone +34 91 713 01 76  
Fax +34 91 355 79 33  
schiller@schiller.es  
www.schiller.es



**Switzerland**  
**SCHILLER-Reomed AG**  
CH-8953 Dietikon  
Phone +41 44 744 30 00  
Fax +41 44 740 37 10  
sales@schiller-reomed.ch  
www.schiller-reomed.ch



**Turkey**  
**SCHILLER TÜRKIYE**  
Okmeydani-Sisli - Istanbul  
Phone +90 212 210 8681 (pbx)  
Fax +90 212 210 8684  
sales@schiller-turkiye.com  
www.schiller-turkiye.com



**USA**  
**SCHILLER America Inc.**  
Doral, Florida 33172  
Phone +1 786 845 0620  
Fax +1 786 845 06 02  
sales@schilleramerica.com  
www.schilleramerica.com

